

Produktkatalog
Standardsortiment varmemhjelpemidler
2019/2020

Høyest varmeeffekt over lang tid

Innhold	Side
Viktig informasjon om varmemhjelpemidler!	4
Hvor mye varmeeffekt trenger jeg?	5
Cypromed Full Moon Mitt	6
Cypromed Fjellvotten Sr.	7
Cypromed Gore-Tex Perform Gauntlet	8
Cypromed C-Zone Contact Pickup	9
Cypromed Classic Matthew	10
Cypromed Classic Emma	11
Cypromed Touch Point Warmth	12
Cypromed Merino Wool Liner Active	13
Cypromed Baby Zip Long	14
Cypromed Gauntlet C-Zone Jr Mitt	15
Cypromed Gauntlet C-Zone Jr	16
Cypromed Granberg Allround	17
Cypromed Granberg Vinter	18
Cypromed Bridgedale Merino	19
Cypromed Triconor	20
Cypromed Ullvang Spesial	21
Cypromed Ullvang Spesial Kids	22
Cypromed Knestrømpe	23
Cypromed Varmesåle	24
Cypromed Termosokk	25
Tilbehør/reservedeler	26
Spesialtilpasninger	27
Måleskjema	22 – 29
Skjema Spesialtilpassede medisinske hjelpemidler	30 - 32

Forbehold:

Alle verdier som varmeeffekt, vekt, størrelser, brukstid etc. er veiledende og kan naturlig variere i noen grad fra produkt til produkt. Bruksområder, tips og anbefalinger er gitt som en indikasjon på forventet oppfattelse av produktet under normale forhold. Råd om medisinske produkter for spesifikke helseilstander eller lidelser bør alltid gjøres i samarbeid med kvalifisert medisinsk personell. Katalogen utgis med forbehold om skrivefeil og andre feilaktige og ikke-tilsiktete feil. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer ut fra det som er oppgitt i katalogen, som følge av sikkerhetskrav eller andre nødvendige justeringer som råd fra helsepersonell-, myndigheter- eller andre organer som har rett til å pålegge slikt, eller dersom slike justeringer på andre måter skulle bli nødvendig.

Bilder oppgitt i katalogen kan variere noe fra endelig produkt (f. eks gjengivelse av farge, søm tekstur osv.).
908.1000.101C

Hvor mye varmeeffekt trenger jeg?

Hva er varmhjelpemidler?

Varmehjelpemidler er kort fortalt en hanske, sokk, sko eller annet produkt som har et innebygd varmeelement. Varme-elementet i produktet mottar elektrisk energi fra et batteri eller annen energikilde som omdannes til varme. Denne tilleggsvarmen kan hjelpe deg med å holde deg varm dersom du er kuldesensitiv, har en skade eller amputasjon, manglende evne til selv å generere varme, eller rett og slett bare fryser mye i kaldt vær.

Varmen som tilføres i varmhjelpemiddelet måles ofte i nominell effekt. Varmeeffekt måles i enheten Watt, på samme måte som en panelovn eller annen varmekilde i hjemmet. Nominell effekt er den varmeeffekten eller energien som produktet i gjennomsnitt vil gi deg under hele bruksperioden. Hos oss vil et voksenprodukt normalt leveres med godt over 7 watt nominell varmeeffekt, mens et barneprodukt typisk vil leveres med 2-5 watt varmeeffekt. Varmeeffekten hjelpemiddelet leveres med vil variere med størrelsen på produktet slik at den er i skala i forhold til det som skal varmes opp inne i produktet. Vårt mål er at du alltid er varm og at batteriet varer lengst mulig.

Produktet leveres også med en batteripakke. Denne batteripakken vil inneholde en begrenset mengde energi. Batterikapasitet oppgis i watt-timer. Når du bruker batteripakken vil den etter hvert gå tom. Når batteriet er oppbrukt lader du det opp før neste gangs bruk. Desto større batteripakke eller høyere antall watt-timer produktet ditt har, desto lengre vil man forvente at brukstiden vil være. Hos oss vil et voksenprodukt leveres med et 19.2 watt-timer batteri, mens et barneprodukt vil leveres med 8.14 watt-timers batteri.

Hvilke egenskaper anses som viktig for varmhjelpemidler?

- ✓ Tilstrekkelig varmeeffekt er varmhjelpemiddelets viktigste egenskap! Varmehjelpemiddelet er i en kontinuerlig kamp mot elementene utenfor produktet! Våre produkter kan levere over 11W varmeeffekt i de tilfeller hvor det er nødvendig.
- ✓ Batterier med høy kapasitet fra en anerkjent batteriprodusent. Når varmhjelpemiddelet leverer høy effekt er det nødvendig at batteriene greier å holde følge. Vårt største batteri vil kunne levere en varmeeffekt på 11W i over 1.5 time! Dette sørger for at du ikke bare er varm, men at du også holder deg varm i lang tid.
- ✓ Godkjenning i henhold til medisinsk direktiv. Dette sikrer at produktet skal være trygt å bruke og at det er tilpasset brukere med medisinske behov.



Viktig informasjon om varmhjelpemidler!

Hva er anbefalt varmeeffekt?

Hvor mye varmeeffekt du trenger vil avhenge av mange faktorer. Generelt sett vil en overflatetemperatur på hud over 20°C oppfattes som greit av de fleste. Vi anbefaler minst 7W i et voksenprodukt. Det finnes i dag mange leverandører av varmeprodukter på markedet. Mange av disse produktene holder en meget lav varmeeffekt, og gir etter vår erfaring ikke tilstrekkelig varme for personer som har et medisinsk behov.

Opplevelsen av varme i produktet vil videre påvirkes av en rekke faktorer:

- **Helsetilstand og egenproduksjon av varme**
- **Isolasjon og materiale i produktet**
- **Utetemperatur**
- **Om produktet er vått eller tørt og hvor slitt det er**
- **Vind og luftfuktighet**
- **Plassering- og mønster av varmetråd i produktet**
- **Størrelsen på produktet (hånd- / fot-størrelse)**
- **Din toleranse av hva som er en behagelig temperatur**
- **Varmeeffekten i produktet**
- **Hvor kald du er når produktet settes på (utgangspunkt)**

Vårt beste råd til deg er at du velger et varmhjelpemiddel som har god nok varmeeffekt til å oppfylle dine behov, og at du er klar over at det kan være store forskjeller fra produsent til produsent. Undersøk alltid hvilken varmeeffekt produktet kan oppnå og om batteriet som følger med er stort nok til å vare så lenge som du trenger det. Om våre standard produkter ikke skulle være tilstrekkelig kan vi også i visse tilfeller spesialtilpasse varmhjelpemidler etter ditt behov.



Cypromed Full Moon Mitt

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt)

Beskrivelse: Lang, tettstittende og meget godt isolert vott som gir god varme i kaldt klima. Slitesterkt og børstet innerfôr gir en myk følelse og binder mye luft for bedre isolasjon. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: 100% polyamid som er vindtett, vannavvisende og pustende. Slitesterkt okseskinn i håndflate.

Detaljer: Stropp med borrelås for stramming rundt håndleddet

Farge: Svart som standard. Fargene hvit, grå og lakserosa kan leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.

Isolasjonsevne: Meget god

Egner seg for: Meget kalde vinterdager



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252679	1	Cy-V1/35181-6
7	252680	1	Cy-V1/35181-7
8	252681	1	Cy-V1/35181-8
9	252682	1	Cy-V1/35181-9



Viktig informasjon om varmehjelpemidler!

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Slitesterk allround skallvott med uttakbart fôr i ullpile og ullfrotté. Det strikkede materialet binder mye luft og har derfor en god isolerende effekt. Votten kan også kombineres med annet fôr eller annen innerhanske. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: HESTRA Triton trelags pustende polyamid. Vind- og vanntett. Nor grip på hansens innside med polyamid PVC-print.

Detaljer: Snølås og strammestropp.

Farge: Svart som standard. Fargene rød og marineblå kan leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.

Isolasjonsevne: God, kan komplementeres med flere isolerende lag om det skulle oppstå behov.

Egner seg for: Kjølig og kaldt vær.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252683	2	Cy-V1/35901-6
7	252684	2	Cy-V1/35901-7
8	252685	2	Cy-V1/35901-8
9	252686	2	Cy-V1/35901-9
10	252687	2	Cy-V1/35901-10
11	252688	2	Cy-V1/35901-11
12	252689	2	Cy-V1/35901-12

Cypromed Gore-Tex Perform Gauntlet

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Varm og slitesterk GORE-TEX hanske med forsterket håndflate og fingertupper. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Ytermateriale: HESTRA Flextron softshell, vindtett, vannavvisende og pustende. Polyamid og elastan. PU-grip i håndflate og fingertupper.

Detaljer: Snølås og strammestropp med borrelås.

Farge: Svart .

Isolasjonsevne: Meget god.

Egner seg for: Aktiviteter som krever bruk av fingre i kaldt/kjølig klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed art. Nr.:
6	252690	2	Cy-V1/31380-6
7	252691	2	Cy-V1/31380-7
8	252692	2	Cy-V1/31380-8
9	252693	2	Cy-V1/31380-9
10	252694	2	Cy-V1/31380-10
11	252695	2	Cy-V1/31380-11



Cypromed C-Zone Contact Pickup

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Hanske i soft-shell stretch-materiale med tynt for med stort bruksområde. Passer for aktiviteter som krever litt finmotorikk. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Ytermateriale: HESTRA Flextron softshell. Vindtett, vannavvisende og pustende CZone membran. Forsterket i håndflate og fingertupper.

Detaljer: Strammestropp med borrelås.

Farge: Svart.

Isolasjonsevne: God.

Egner seg for: Aktiviteter som krever bruk av fingre i kjølig klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252696	3	Cy-V1/32290-6
7	252697	3	Cy-V1/32290-7
8	252698	3	Cy-V1/32290-8
9	252699	3	Cy-V1/32290-9
10	252700	3	Cy-V1/32290-10
11	252701	3	Cy-V1/32290-11
12	252702	3	Cy-V1/32290-12



Cypromed Classic Matthew

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Tettsittende skinnhanske for herre med ullfôr. Strikk i mansjett for god passform. Passer for aktiviteter som krever godt grep og finmotorikk. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: Hjorteskinn.

Detaljer: Strikk i mansjett beskytter mot kald luft og gir god passform.

Farge: Svart.

Isolasjonsevne: Middels

Egner seg for: Aktiviteter i kjølig klima som krever godt grep og bruk av fingre.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
7	252703	4	Cy-V2/20220-7
8	252704	4	Cy-V2/20220-8
9	252705	4	Cy-V2/20220-9
10	252706	4	Cy-V2/20220-10
11	252707	4	Cy-V2/20220-11



Cypromed Classic Emma

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Tettsittende, håndsydd skinnhanske for dame med ullfør. Strikk i mansjett for god passform. Passer for aktiviteter som krever godt grep og finmotorikk. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: Hjorteskinn.

Detaljer: Strikk i mansjett beskytter mot kald luft og gir god passform.

Farge: Svart.

Isolasjonsevne: Middels

Egner seg for: Aktiviteter i kjølig klima som krever godt grep og bruk av fingre.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252708	4	Cy-V2/10220-6
7	252709	4	Cy-V2/10220-7
8	252710	4	Cy-V2/10220-8



Cypromed Touch Point Warmth

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Varm, komfortabel innerhanske med touchfunksjon på tommel- og pekefinger for å kunne benytte touchskjerm uten å måtte ta av hansken. Primært ment for å brukes inni annen hanske/vott. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: Ull, polyester og elastan.

Detaljer: Touch-skjerm kompatibel.

Farge: Svart.

Isolasjonsevne: Lite, krever hanske eller vott utenpå i kalde klima.

Egner seg for: Bruk inni annen hanske, vott eller gummi-hanske i vått og/eller kjølig klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252711	5	Cy-V2/34370-6
7	252712	5	Cy-V2/34370-7
8	252713	5	Cy-V2/34370-8
9	252714	5	Cy-V2/34370-9
10	252715	5	Cy-V2/34370-10
11	252716	5	Cy-V2/34370-11



Cypromed Merino Wool Liner Active

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Myk og tynn innerhanske som primært er ment for bruk inni annen hanske/vott. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: Merinoull og polyamid.

Farge: Mørk grå.

Isolasjonsevne: Lite, krever hanske eller vott utenpå i kalde klima.

Egner seg for: Bruk inni annen hanske, vott eller gummi-hanske i vått og/eller kjølig klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252717	5	Cy-V2/34110-6
7	252718	5	Cy-V2/34110-7
8	252719	5	Cy-V2/34110-8
9	252720	5	Cy-V2/34110-9
10	252721	5	Cy-V2/34110-10
11	252722	5	Cy-V2/34110-11



Cypromed Baby Zip Long

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Mellom 2-5 W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Slitesterk, myk og dunaktig vott for de minste som er enkel å få av og på med glidelås i siden. Lang mansjett gir god passform. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Ytermateriale: HESTRA Micron polyester. Vindtett, vann-avvisende og pustende. Forsterket håndflate og fingertupper.

Detaljer: Strammestropp med borrelås, glidelåslukking i siden.

Farge: Svart som standard. Fargene rosa, blå og mønstrete kan leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.

Isolasjonsevne: Meget god.

Egner seg for: Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art.nr.:
1	252723	6	Cy-B1/36421-1
2	252724	6	Cy-B1/36421-2
3	252725	6	Cy-B1/36421-3



Cypromed Gauntlet C-Zone Jr Mitt

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Mellom 2-5W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt)

Beskrivelse: Varm juniorvott med børstet innerfôr som gir en myk følelse og som binder luft for god isolasjon. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Ytermateriale: HESTRA Micron polyester. Vindtett, vann-avvisende og pustende. Forsterket håndflate og fingertupper gir styrke mot slitasje.

Detaljer: Strammestropp med borrelås og snølås.


Farge: Svart som standard. Fargene rosa og blå kan leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.

Isolasjonsevne: Meget god.

Egner seg for: Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
3	252726	7	Cy-B1/32531-3
4	252727	7	Cy-B1/32531-4
5	252728	7	Cy-B1/32531-5
6	252729	7	Cy-B1/32531-6
7	252730	7	Cy-B1/32531-7

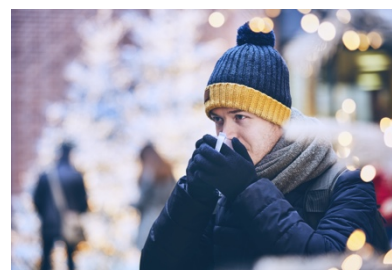

Cypromed Gauntlet Czone Jr

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Mellom 2-5W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Varm juniorhanske med børstet innerfôr som gir en myk følelse og som binder luft for god isolasjon. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Ytermateriale: HESTRA Micron polyester. Vindtett, vann-avvisende og pustende. Forsterket håndflate og fingertupper gir styrke mot slitasje.

Detaljer: Strammestropp med borrelås og snølås.


Farge: Svart som standard. Fargene rosa og blå kan leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.

Isolasjonsevne: Meget god.

Egner seg for: Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
3	252731	8	Cy-B2/32530-3
4	252732	8	Cy-B2/32530-4
5	252733	8	Cy-B2/32530-5
6	252734	8	Cy-B2/32530-6
7	252735	8	Cy-B2/32530-7

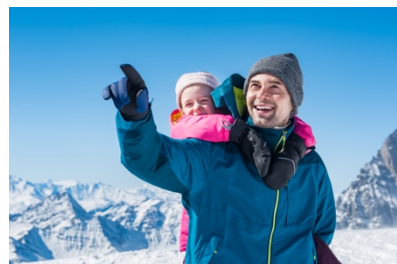

Cypromed Granberg Allround

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Fleksibel arbeidshanske med godt grep som passer for arbeid i kaldt miljø som krever smidighet og bevegelse. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål

Ytermateriale: Microskin Shield spandex. Vannavvisende, vindtett og pustende.

Detaljer: Refleks rundt håndledd.

Farge: Svart med grønne detaljer.

Isolasjonsevne: God.

Egner seg for: Arbeid i kjølige omgivelser.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
8	252736	9	Cy-V2/107-8
9	252737	9	Cy-V2/107-9
10	252738	9	Cy-V2/107-10
11	252739	9	Cy-V2/107-11
12	252740	9	Cy-V2/107-12



Cypromed Granberg Vinter

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Fleksibel arbeidshanske med varmt og mykt fôr og med god varmeisolasjon. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: Overside i Spandex og underside i geiteskinn. Vindtett, vanntett og pustende membran.

Farge: Hvit og grå.

Isolasjonsevne: Meget god.

Egner seg for: Arbeid i kuldeler eller utendørs vinterstid.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
7	252741	9	Cy-V2/113-7
8	252742	9	Cy-V2/113-8
9	252743	9	Cy-V2/113-9
10	252744	9	Cy-V2/113-10
11	252745	9	Cy-V2/113-11
12	252746	9	Cy-V2/113-12



Cypromed Bridgedale Merino

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt)

Beskrivelse: Tykk ullsokk med god passform som er designet for tørre og varme føtter. Varmeråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.

Materiale: Ull, nylon, polypropylen og elastan.

Farge: Svart og grå.

Isolasjonsevne: Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy ved bruk i kalde klima.

Egner seg for: Bruk i sko. Støvler eller annet fottøy.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
36 – 39	252747	11	Cy-V4/B710169846-36/39
40 – 43	252748	11	Cy-V4/B710169846-40/43
44 – 47	252749	11	Cy-V4/B710169846-44/47
48	252750	11	Cy-V4/B710169846-48



Cypromed Triconor

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Tykk sokk i ullfrotté som sitter godt på foten uten å stramme. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.

Materiale: Ull og polyamid.

Farge: Svart.

Isolasjonsevne: Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy ved bruk i kalde klima.

Egner seg for: Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
36 – 39	252751	11	Cy-V4/TRIC-36/39
40 – 44	252752	11	Cy-V4/TRIC-40/44
45 – 48	252753	11	Cy-V4/TRIC-45/48



Cypromed Ulvang Spesial

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Medium tykk helårs merino ullsokk. Slitesterk og god passform med frottering i såle som gir ekstra varme og komfort. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.

Materiale: Merinoull, lycra og nylon.

Farge: Svart som standard.

Isolasjonsevne: Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fotteøy i kalde klima.

Egner seg for: Bruk i sko, støvler eller annet fotteøy.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
34 – 36	252754	11	Cy-V4/U75111-34/36
37 – 39	252755	11	Cy-V4/U75111-37/39
40 – 42	252756	11	Cy-V4/U75111-40/42
43 – 45	252757	11	Cy-V4/U75111-43/45
46 – 48	252758	11	Cy-V4/U75111-46/48



Cypromed Ulvang Spesial Kids

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Under 5W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Medium tykk helårs merino ullsokk. Slitesterk og god passform med frottering i såle som gir ekstra varme og komfort. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.

Materiale: Merinoull, nylon og lycra.

Farge: Rosa eller blå.

Isolasjonsevne: Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.

Verdt å vite: MERK: Cypromed Ulvang Spesial Kids i størrelse 19-24 kommer i to varianter; rosa og blå. Merk bestilling med fargevalg, hvis valg av farge er ønskelig.

Egner seg for: Bruk i sko, støvler og annet fottøy.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
19 – 21	252759	12	Cy-B4/U75113-19/21
22 – 24	252760	12	Cy-B4/U75113-22/24



Cypromed Knestrømpe

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Under 5W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Knestrømpe for barn med god passform. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse

Materiale: Ull og stretchnylon.


Farge: Svart.

Isolasjonsevne: Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fotteøy i kalde klima.

Egner seg for: Bruk i sko, støvler eller annet fotteøy.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
19 – 22	252761	13	CyB3R/S836B-19/22
23 – 26	252762	13	CyB3R/S836B-23/26
27 – 30	252763	13	CyB3R/S836B-27/30
31 – 34	252764	13	CyB3R/S836B-31/34

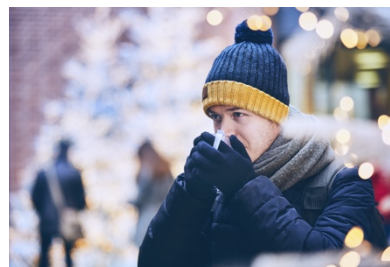

Cypromed Varmesåle

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Varmesåler for bruk i fottøy. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse

Materiale: EVA og fleece.

Farge: Svart.

Isolasjonsevne: Lite, ment for bruk i fottøy hvor fottøyet vil definere isolasjonsegenskapene.

Egner seg for: Bruk i fottøy.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252765	14	Cy-V5/sole-36/37
7	252766	14	Cy-V5/sole-38/39
8	252767	14	Cy-V5/sole-40/41
9	252768	14	Cy-V5/sole-42/43
10	252769	14	Cy-V5/sole-44/45
11	252770	14	Cy-V5/sole-46/47



Cypromed Termosokk

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt)

Beskrivelse: Varm og myk termosokk. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.

Materiale: Polyester og nylon.

Detaljer: Ankelstropp og sklisikker såle.

Farge: Svart som standard.

Isolasjonsevne: Meget god.

Verdt å vite: Tåler ikke samme bruk som sko for hardt utendørs bruk da produktet ikke har en fast såle

Egner seg for: Bruk i kaldt miljø.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252771	15	Cy-V4/termo-37/38
7	252772	15	Cy-V4/termo-39/41
8	252773	15	Cy-V4/termo-42/43
9	252774	15	Cy-V4/termo-44/46
10	252775	15	Cy-V4/termo-47/49



Tilbehør/reservedeler

Beskrivelse	HMS-art. nr.	Passer best til	Leverandørens art.nr.
Individuell tilpasning	214083	Alle produkter som kan spesialtilpasses etter instruksjon fra klinisk personell	
Batteri, stort, 5200 mAh / 19.2 Wh 10 cm kabellengde (hansker)	252778	Varmehjelpemidler til voksne	1S1751AB-32/100
Batteri, stort, 5200 mAh / 19.2 Wh 32 cm kabellengde (sokker o.l.)	252779	Varmehjelpemidler til voksne som trenger lang kabel	1S1751AB-32/320
Batteri, lite, 2200 mAh / 8.14 Wh 10 cm kabellengde (hansker)	252776	Varmehjelpemidler til barn	1IMP133450/100
Batteri, lite, 2200 mAh / 8.14 Wh 200mm kabellengde (sokker o.l.)	252777	Varmehjelpemidler til barn som trenger lang kabel	1IMP133450/200
2-kanals batterilader	239891	3.7 V batterier til varmhjelpemidler	Cy-GT2K
Batteriholder leggfeste for voksne	175253	Såler/Sokker til voksne	Cy-BHV-Legg
Batteriholder leggfeste for barn	175252	Sokker til barn	Cy-BHB-Legg



Måleskjema (del 1 av 2)

Cypromed kan også levere spesialtilpassede produkter som kan være nødvendig ved for eksempel amputasjoner og lignende. Vi kan også tilpasse varme i andre produkter hvor det er behov for varme.



Ta kontakt for nærmere informasjon om spesialtilpassede produkter. Merk at alle søknader om spesialtilpassede produkter må komme fra kvalifisert klinisk personell hvor de må beskrive det spesialtilpassede produktets formål og virkemåte.

Send oss gjerne en e-post til service@cypromed.no, eller ring oss om det skulle være noe du vil vite mer om!

Se eget skjema for dette på kommende sider.

Spesialtilpasninger

ORDRENUMMER:

KONTAKTINFORMASJON FRA SØKER AV VARMEHJELPEMIDDEL:

Søkers ref.:		DATO:		ANTALL SIDER:	
TELEFON:	ANNEN INFORMASJON AV BETYDNING: <i>(benytt eget ark ved behov):</i>				
E-POST:					
☐ SPESIALTILPASNING ER ØNSKET <i>(Benytt eventuelt eget skjema fra Cypromed for dette)</i>					

ARTIKKELNUMMER	ANTALL	TYPE HJELPEMIDDEL	STØRRELSE

BATTERIPLASSERING


	På produktet <i>Standard på håndbekledning</i>	Underarm/legg <i>Standard på fotbekledning</i>	Overarm/Lår <i>Spesialtilpasning</i>	Beltefeste <i>Spesialtilpasning</i>
Kryss merkes i rute til venstre. Om du ønsker standard løsning kan du og merke tomt.				

EKSTRA BATTERIER UTOVER STANDARD


	Batteri, Stort/Kort <i>1S1751AB-32/100F</i> <i>Stort batteri med kort ledning</i> <i>(Hansker/Votter, Voksen)</i>		Batteri, Stort/Lang <i>1S1751AB-32/320F</i> <i>Stort batteri med lang ledning</i> <i>(Såler/Sokker, Voksen)</i>		Batteri, Lite/Kort <i>1IMP133450/100F</i> <i>Lite batteri med kort ledning</i> <i>(Hansker/Votter, Barn)</i>		Batteri, Lite/Lang <i>1IMP133450/200F</i> <i>Stort batteri med lang ledning</i> <i>(Såler/Sokker, Barn)</i>
	Batterilader 2-kanals <i>CY-GT2K, for alle batterier 3.7V</i>				Annet:		
<i>Merk antall i rute til venstre</i>							

Skjema skal IKKE inneholde personidentifiserende opplysninger.

Måleskjema (del 2 av 2)

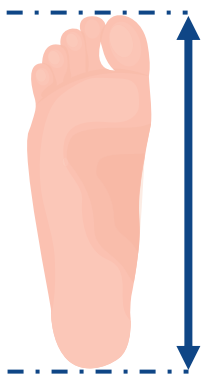

1. Mål fotens lengde, denne angir størrelse i tabell under.

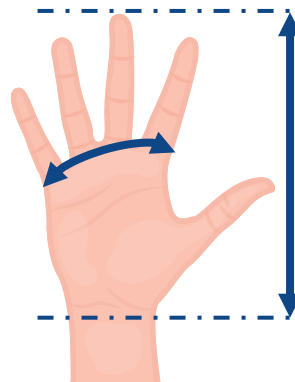

1. Mål håndens omkrets rundt hånd (MCP-mål)
MCP-mål i diameter (Ø) angir størrelse i tabell under.
2. (Mål håndens lengde fra ledd til lengste finger for henvendelser til oss om størrelser)

Størrelser Herre		
	Størrelse	Ø cm
Small	7	18
Medium	7 ½ - 8	20
Large	8 ½ - 9	23
X-large	9 ½ - 10	25
XX-large	10 ½ - 11	30

Størrelser Barn/Jr.			
Baby/barn		Junior	
Str	År	Str	År
1	1-2	3	4-5
2	2-3	4	6-7
3	3-4	5	8-9
4	4-5	6	10-11
5	5-6	7	12-13
6	6-7		

Størrelser Dame		
	Størrelse	Ø cm
X-small	6	15
Small	6 ½	17
Medium	7	18
Large	7 ½	19
X-large	8	20

Såler/Sokker	
Lengde	Størrelse (EU)
13.0-13.5	20-21
14-14.5	22-23
14.5-15.0	24-25
15.5-16.5	26-27
17.0-18.0	28-29
18.5-19.5	30-31
20.0-21.0	32-33
21.5-22.0	34-35
22.5-23.0	36-37
23.2-24.2	38-39
25.4-24.7	40-41
26.0-27.0	42-43
27.0-27.9	44-45
27.9-28.6	46-47
Dersom mål er mellom to størrelser, kan det lønne seg å velge det største alternativet.	

Spesialtilpassede medisinske hjelpemidler (del 1 av 3)

ORDRENUMMER		AKRONYM/ TALLKODE BRUKER:	
SPESIALTILPASNING BESTILLER:			
Søkers ref:		FORETAK/HELSEINSTITUSJON/AVDELING/ENHET:	
TELEFON:			
E-POST:			
☐ SPESIALTILPASNING ER PÅKREVD			

SPESIALTILPASNING – PRODUKTETS SÆRLIGE EGENSKAPER, BESKRIVELSE:



TILVIRKER AV SPESIALTILPASNING:

CYPROMED AS
VIKAVEGEN 17
2312 OTTESTAD
+47 62 57 44 33
SERVICE@CYPROMED.NO

Erklæring etter Forskrift om Medisinsk Utstyr, vedlegg ØMU VIII: Utstyret er beregnet til å benyttes av bruker som identifisert med ordrenummer og/eller akronym/tallkode og utstyret skal ikke benyttes av andre. Utstyret er utformet av produsent med bakgrunn av utsteders grunnlag for søknad. Utstyret er i samsvar med grunnleggende krav i vedlegg ØMU I og er produsert på basis av andre produserte og CE merkede produkter, men avviker på grunnlag av de egenskaper som det er bedt om-, og etter anvisning fra utsteder av søknad. Avvik fra standard produksjon gjøres på individuell basis, og hvor det vil være nødvendig med endring fra standard produkt for å oppnå det endelige produktets særlige egenskaper etter henvisning og for å oppnå tilstrekkelig terapeutisk/medisinsk effekt.

Skjema fylles ut med bakgrunn fra Forskrift om Medisinsk Utstyr §5-1a: (individuell tilpasset utstyr: ethvert utstyr som er framstilt særskilt etter skriftlig anvisning fra en behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver og som gir, på dennes ansvar, utstyret spesielle konstruksjonskjennetegn, og som er beregnet til bruk for en bestemt pasient). Utfylt og returnert skjema fra produsent vil tilfredsstille krav i Vedlegg ØMU VIII, - 2.1 (Erklæring om utstyr til særskilte formål), og således følge med endelig produsert varmemiddel.

Skjema skal IKKE inneholde personidentifiserende opplysninger.

Spesialtilpassede medisinske hjelpemidler (del 2 av 3)

ORDRE NUMMER		AKRONYM/ TALLKODE	
--------------	--	----------------------	--

ARBEID UTFØRT/ØNSKET UTFØRT AV TILVIRKER	
ID	BESKRIVELSE

Antall vedlegg (målsatte tegninger m.m.):	
Detaljert beskrivelse av spesialtilpasning:	

Skjema skal IKKE inneholde personidentifiserende opplysninger.

Regler for spesialtilpasninger (Medisinsk utstyrsdirektiv)

Vedlegg ØMU VIII: Erklæring om utstyr til særskilte formål

1. Produsenten eller hans ansvarlige representant etablert i EØS-området må, med hensyn til individuelt tilpasset utstyr eller utstyr beregnet til klinisk utprøving, utarbeide en erklæring med de opplysninger som er nevnt i nr. 2.
2. Erklæringen skal inneholde følgende opplysninger:
 - 2.1 For individuelt tilpasset utstyr:
 - produsentens navn og adresse,
 - opplysninger som gjør det mulig å identifisere vedkommende utstyr,
 - erklæring om at utstyret er beregnet til å brukes bare av en bestemt pasient, med angivelse av vedkommendes navn,
 - navnet på legen eller en annen godkjent person som har laget beskrivelsen og eventuelt navnet på vedkommende helseinstitusjon,
 - produktets særlige egenskaper som angitt i resepten,
 - erklæring om at utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav i vedlegg ØMU I, og eventuelt angivelse av hvilke grunnleggende krav som ikke er oppfylt fullt ut og hvorfor.

Kapittel 5. Øvrig medisinsk utstyr

§ 5-1. (definisjoner m.m.)

I dette kapittelet og i vedleggene for ØMU forstås med:

- a) *individuelt tilpasset utstyr*: ethvert utstyr som er framstilt særskilt etter skriftlig anvisning fra en behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver og som gir, på dennes ansvar, utstyret spesielle konstruksjonskennetegn, og som er beregnet til bruk for en bestemt pasient.

Anvisningen nevnt ovenfor kan også utarbeides av enhver annen person som i kraft av sine faglige kvalifikasjoner har tillatelse til å gjøre det.

Masseframstilt utstyr som må tilpasses for å oppfylle legens eller en annen profesjonell brukers spesifikke behov, skal ikke anses som individuelt tilpasset utstyr.

